

## SOIN ET ENTRETIEN

- Laissez le capuchon sur le Dermaplane GLÖ lorsque vous le manipulez. Enlevez le capuchon lorsque vous être prêt à utiliser l'appareil.
- Pour obtenir des résultats optimaux, jetez la tête Dermaplane GLÖ après chaque utilisation.
- Assurez-vous d'éteindre l'appareil après utilisation.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et sécuritaire.

## AVERTISSEMENTS

- N'UTILISEZ PAS Flawless Dermaplane GLÖ sur une zone du corps pour laquelle il n'a pas été conçu (lèvres, nez et directement sur les paupières). Flawless Dermaplane GLÖ a été conçu pour être utilisé seulement sur le front, au-dessus des sourcils, sur les joues, au-dessus de la lèvre supérieure et sur le menton.
- N'UTILISEZ PAS Flawless Dermaplane GLÖ sur une peau sèche, acnéique, brûlée par le soleil ou si vous souffrez de psoriasis, d'eczéma, de diabète ou de troubles hémorragiques ou sur une peau qui a été traitée médicalement. Cessez d'utiliser l'appareil si la peau devient irritée.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur les grains de beauté, les plaies et les lésions.
- NE RINCEZ PAS le manche ni l'unité sous l'eau et ne l'immergez pas dans un liquide.
- NE JETEZ PAS la pile dans un feu car elle pourrait exploser.
- Éliminez les piles usagées selon les règlements locaux applicables.
- Flawless Dermaplane GLÖ n'a pas été conçu pour les personnes de 12 ans ou moins.

### LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Pour obtenir des articles ou accessoires Flawless additionnels, des vidéos sur l'utilisation et pour enregistrer votre produit, visitez le [www.FlawlessBeaute.ca](http://www.FlawlessBeaute.ca)

Distribué par :  
Supertek Canada Inc.  
Mont-Royal, QC H4T 1X2

[www.clikit.ca](http://www.clikit.ca)

© IdeaVillage

DM\_FTGLÖ\_IMF\_080919ST

FINISHING TOUCH<sup>MD</sup>  
**FLAWLESS**  
**DERMAPLANE**<sup>MC</sup> **GLÖ**<sup>MC</sup>

## Appareil d'exfoliation faciale lumineux




• EXFOLIE • ÉLIMINE • ADOUCIT

TÊTES DE RECHANGE INCLUSES


## Appareil d'exfoliation faciale lumineux




- Enfoncez le haut du manche dans le haut de la nouvelle tête (image 7C).

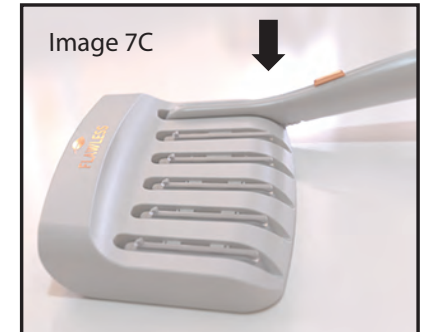

- Faites basculer le manche vers l'arrière en vous assurant de l'enfoncer jusqu'à ce que la nouvelle tête s'enclenche (image 7D).

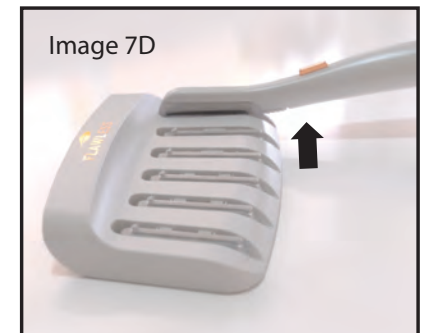

- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé (image 7E).

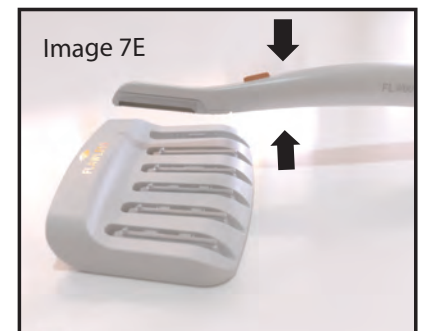


**NOTE : N'UTILISEZ PAS une tête qui semble endommagée.**

## TÊTES DE REMPLACEMENT

Utilisez une nouvelle tête Dermaplane GLÔ à chaque traitement.


- Assurez-vous que la lumière de l'appareil soit éteinte.
- Retirez la tête en glissant le bouton d'éjection vers le bas (image 6)
- Jetez la tête usagée.

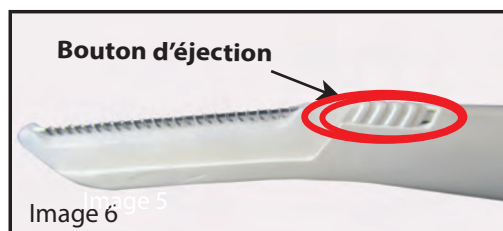

- Tenez bien le plateau d'une main et prenez le manche avec l'autre main.
- Tenez le haut du manche au-dessus d'une nouvelle tête (image 7A).



- Orientez le haut du manche sur le haut d'une nouvelle tête (image 7B).

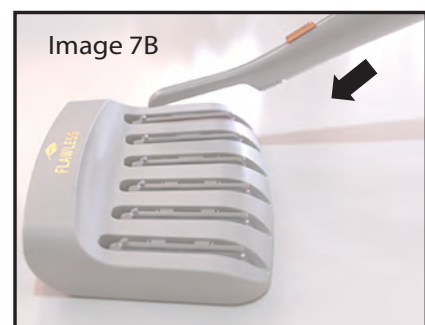

## Pour commencer

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Faites un test sur une zone discrète.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de réaction allergique ou de sensibilité.

Le Flawless Dermaplane GLÔ est livré prêt à être utilisé. L'appareil est recommandé pour exfolier/épiler les poils sur le front, au-dessus des sourcils, sur les joues, au-dessus de la lèvre supérieure et sur le menton.

### INSERTION/REPLACEMENT DE LA PILE

- Tirez doucement sur le capuchon du compartiment (image 1).
- Insérez une pile AAA dans le compartiment en vous assurant que le pôle (+) est vers le haut de l'unité.
- Remettez le capuchon.
- Répétez les étapes pour le remplacement de la pile.



## MODE D'EMPLOI

### USAGE À SEC SEULEMENT

**Il est recommandé d'utiliser le Dermaplane Glo le soir avant d'aller au lit pour que la peau puisse récupérer.**

**Assurez-vous de laisser passer 1 à 2 semaines entre les traitements.**

- Sélectionnez une nouvelle tête Dermaplane propre à chaque utilisation.
- Tenez Dermaplane d'une main puis glissez doucement le capuchon avec l'autre main (image 2).
- Enfoncez le bouton ON (marche) pour illuminer la zone (image 3).
- Pour obtenir des résultats optimaux, tirez la peau avec votre main libre puis tenez Dermaplane à un angle de 45° avec l'autre main.
- Passez Dermaplane en donnant de petits coups et en effleurant doucement la peau en commençant par la ligne des cheveux et en allant vers l'intérieur tout en suivant les contours du visage (image 4).
- **NE PRESSEZ PAS** la tête sur la peau. Ne jamais exercer de pression. Lorsque vous utilisez l'appareil, vous ne devez passer qu'UNE SEULE fois sur chaque zone.

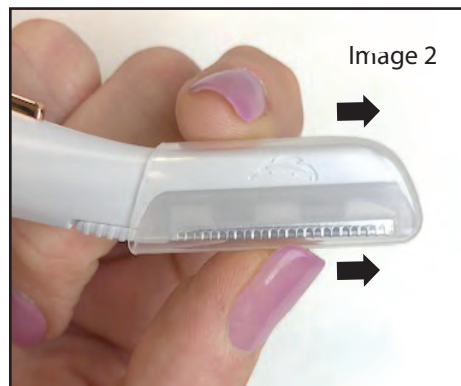


Image 2

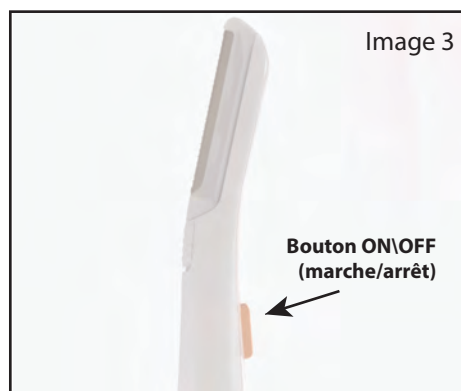


Image 3



Image 4

Image 5



- Il est recommandé d'utiliser le Dermaplane GLÖ tel qu'illustré (image 5).

### CONSEILS DE PRO

Après avoir utilisé le Dermaplane GLÖ, laissez reposer votre peau.

Évitez d'appliquer crème et maquillage pendant plusieurs heures.

### APRÈS UTILISATION

- Laissez la peau respirer pendant plusieurs heures avant d'appliquer une lotion, un sérum ou du maquillage.
- Il n'est PAS recommandé d'appliquer du maquillage immédiatement après l'utilisation du Dermaplane GLÖ.
- Ne vous faites pas bronzer immédiatement après l'utilisation du Dermaplane GLÖ.

**Note: Après avoir utilisé le Dermaplane GLÖ, la peau sera peut-être légèrement rose ou rouge. C'est normal après le traitement et ça disparaîtra en quelques heures.**

**Si la rougeur ou une sensation de brûlure augmente avec le temps, cessez d'utiliser l'appareil.**