

Smart Swab™

⚠ WARNING

This product should not be used on children under the age of 12.
This product should not be used on individuals with ear tubes.
Do not use if you experience pain, discomfort, hearing loss, pressure, or bleeding.

⚠ WARNING

Smart Swab should NOT be used in the following situations without a Physician's supervision:
-Individuals suffering from Meniere's Syndrome or experiencing any form of dizziness, vertigo, hardness of hearing or other ear problems
-Individuals with ear infections
-Individuals with tubes in their ears
-Individuals who have had mastoid surgery
-Individuals with current or previously perforated ear drums

⚠ CAUTION

Please do not REUSE or wash spiral tips. These tips are good for one-time use only (one per ear canal). Reusing the tips may cause infection or ear damage. If you wish, you may clean the Smart Swab handle with warm soapy water and dry thoroughly before storing.

⚠ CAUTION

DO NOT POKE, JAB, OR FORCE SMART SWAB INTO YOUR EAR. THIS PRODUCT IS NOT FOR DEEP EAR CANAL INSERTION. EAR WAX IS PRODUCED NEAR THE ENTRANCE OF THE EAR CANAL, KNOWN AS THE "OUTER EAR CANAL". IMPACTED EAR WAX SHOULD BE REMOVED BY A HEALTH CARE PROFESSIONAL. TURN ONLY IN DIRECTION INDICATED BY HANDLE OR ELSE SERIOUS INJURY MAY RESULT

Please Read All Instructions Thoroughly Before Use


Before use, please note the arrows on the Smart Swab Handle. These arrows indicate the direction in which the handle should be turned. The handle should not be spun in the opposite direction or twisted back and forth. If the handle is used improperly it could cause serious injury.



Instructions For Use

Right Ear Cleaning

- Remove Smart Swab™ handle (preloaded with ear tip) from the case.
 - Carefully and gently insert tip into right ear. Do not force tip too far into ear canal.
 - Twist in direction of arrow on handle to collect ear wax. Do not twist in the other direction. (Figure A)
 - To avoid injury, do not use while moving.

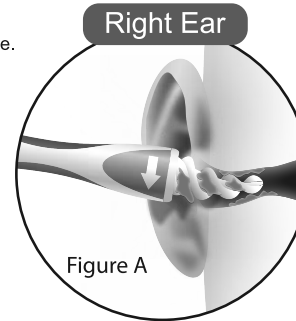

Right Ear

Figure A

Ear Tip Removal

- Press on both sides of tip and push forward until it is released. (Figure B)
 - Eject tip into any household waste container. Do not flush down toilet.

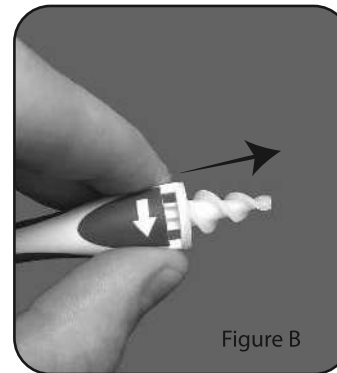


Figure B

Ear Tip Installation

- Additional tips are included in the protective case.
 - To load tip onto handle, line up slots on tip with grooves on handle.
 - Press down firmly to lock together.


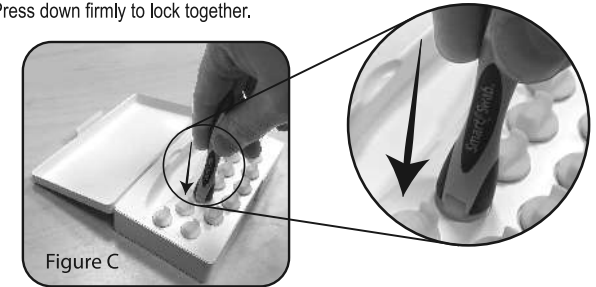


Figure C

Left Ear Cleaning

- Carefully and gently insert tip into left ear. Do not force tip too far into ear canal.
 - Twist in direction of arrow on handle (reverse of right ear direction) to collect ear wax. Do not twist in other direction.
 - To avoid injury, do not use while moving.
 - Store handle in the protective case when not in use.

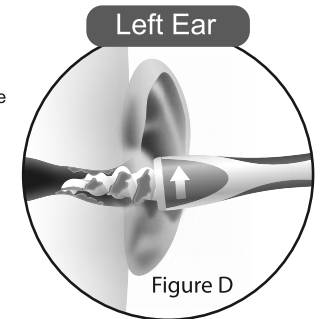

Left Ear

Figure D

Product May Vary From Item Shown

LIMITATION OF LIABILITY

Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product.

Supertek™

Distributed by
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Customer Service:
1-800-304-8354

Smart Swab^{MC}

⚠ AVERTISSEMENTS

Ce produit ne doit pas être utilisé sur des enfants âgés de moins de 12 ans.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des drains dans les oreilles.
N'utilisez pas ce produit si vous ressentez de la douleur, de l'inconfort ou de la pression, si vous avez des pertes auditives, ou des saignements.

⚠ AVERTISSEMENTS

Smart Swab^{MC} NE DOIT PAS ÊTRE utilisé sans la supervision d'un médecin par :
-Les personnes souffrant de la maladie de Ménière ou ayant des étourdissements, vertiges, problèmes de surdité ou autres problèmes auditifs.
-Les personnes souffrant d'otites.
-Les personnes ayant des drains dans les oreilles.
-Les personnes ayant eu une chirurgie de la mastoïde.
-Les personnes qui ont déjà eu ou ont les tympans perforés.

⚠ MISES EN GARDE

Ne RÉUTILISEZ PAS et ne lavez pas les embouts en spirale. Ces embouts sont à usage unique seulement (un par conduit auditif). La réutilisation des embouts peut causer des infections ou des dommages aux oreilles. Vous pouvez laver le manche Smart Swab avec de l'eau chaude savonneuse et l'essuyer complètement avant de le ranger.

⚠ MISES EN GARDE

LORSQUE VOUS UTILISEZ SMART SWAB, ÉVITEZ DE DONNER DES COUPS ET DE FORCER POUR LE FAIRE PÉNÉTRER DANS LES OREILLES. CE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE INSÉRÉ PROFONDÉMENT DANS LE CONDUIT AUDITIF. LE CÉRUMEN EST PRODUIT PRÈS DE L'ENTRÉE DU CONDUIT AUDITIF CONNU COMME ÉTANT L'OREILLE EXTERNE. LE CÉRUMEN À L'INTÉRIEUR DE L'OREILLE DOIT ÊTRE ENLEVÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. TOURNEZ LE MANCHE DANS LA DIRECTION INDIQUÉE SEULEMENT SINON VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER SÉRIEUSEMENT.

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit

Avant d'utiliser le produit, regardez les flèches sur le manche Smart Swab. Ces flèches indiquent la direction vers laquelle tourner le manche. Le manche ne doit pas être tourné en direction opposée ou d'avant en arrière. Une mauvaise utilisation du manche peut causer de sérieuses blessures.



Mode d'emploi

Nettoyage de l'oreille droite

1. Retirez le manche de Smart Swab^{MC} (avec l'embout déjà installé) de l'étui.

Oreille droite

- Insérez soigneusement et doucement l'embout dans l'oreille droite. N'enfonchez pas l'embout trop loin dans le conduit auditif.

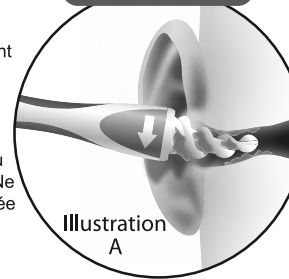


Illustration A

- Tournez dans le sens de la flèche du manche afin d'enlever le cérumen. Ne tournez pas dans la direction opposée (illustration A).

- Afin d'éviter les blessures, n'utilisez pas cet objet lorsque vous bougez.

Pour enlever l'embout

2. Appuyez sur les deux côtés de l'embout et tirez-le pour le dégager (illustration B).
- Éjectez l'embout dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

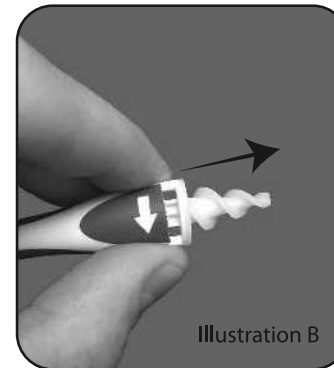


Illustration B

Le produit peut varier de celui illustré.

Installation de l'embout

3. Des embouts additionnels sont inclus dans l'étui de protection.
- Pour installer l'embout sur le manche, alignez les fentes de l'embout avec les rainures du manche.
- Enfoncez fermement pour fixer l'embout.



Illustration C



Nettoyage de l'oreille gauche

4. Insérez soigneusement et doucement l'embout dans l'oreille droite. N'enfonchez pas l'embout trop loin dans le conduit auditif.

Oreille gauche

- Tournez dans le sens de la flèche du manche (sens opposé à celui pour l'oreille droite) afin d'enlever le cérumen. Ne tournez pas dans la direction opposée.

- Afin d'éviter les blessures, n'utilisez pas cet objet lorsque vous bougez.

- Rangez le manche dans l'étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.

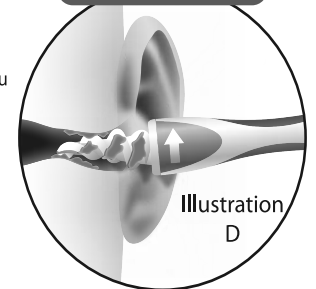


Illustration D

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

SupertekTM

Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Fabriqué en Chine

Service à la clientèle:
1-800-304-8354