




Tue les puces* sans pesticides
*80 % sont paralysées ou tuées au contact

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. L'UTILISATION INADÉQUATE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER DES BLESSURES. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

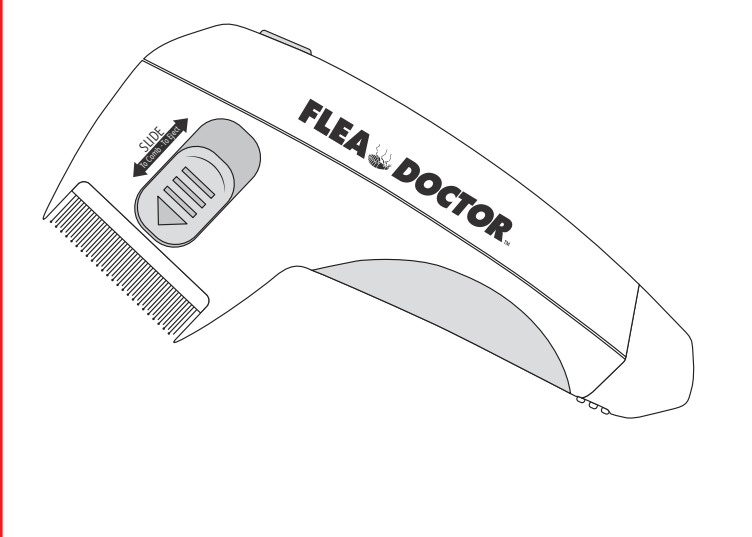

LE PRODUIT PEUT VARIER DE CELUI ILLUSTRÉ.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements 2
Éléments du produit 3
Installation et remplacement des piles 3
Pour commencer 4
Mode d'emploi 4,5,6
Nettoyage 6

INTRODUCTION

Le Flea Doctor™ a été conçu pour arrêter la prolifération des puces dans le pelage de votre chat ou de votre chien et les éliminer. Flea Doctor™ émet une petite charge électrique pour tuer ou paralyser 80 % (moyenne) des puces au contact des dents du peigne. Les résultats dépendent des efforts que fait l'utilisateur pour peigner et du contact entre le peigne et les puces. Flea Doctor™ peut être utile dans le cadre de votre programme de contrôle des puces. L'utilisation régulière de Flea Doctor™ permettra d'éliminer les puces adultes de votre animal. Afin d'éviter toute réinfestation, vous devez aussi éliminer les lentes et larves de puces qui peuvent se trouver dans les tapis, meubles et lits d'animaux. Passez régulièrement l'aspirateur sur les tapis, meubles, bas de rideaux et les fentes des planchers pour éliminer les lentes et larves. Lavez régulièrement les lits d'animaux dans une eau chaude savonneuse.

NOTIFICATIONS

- NE RANGEZ PAS et n'utilisez PAS ce produit près de sources de chaleur afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- N'IMMERGEZ PAS Flea Doctor™ dans un liquide ou dans l'eau afin d'éviter de l'endommager.
- NE MÉLANGEZ PAS piles usagées et neuves. Remplacez toujours LES DEUX (2) PILES en même temps afin d'obtenir un rendement optimal.
- NE MÉLANGEZ PAS piles alcalines, standards (carbone zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). N'utilisez que le format et le type de piles spécifiés. Le mélange de piles différentes quant à leur type, usure ou marque peut causer des fuites et des ruptures.


AVERTISSEMENTS

- **RANGÉZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.**
- **RISQUE DE SUFFOCATION/ÉTOUFFEMENT** : Éviter les risques de suffocation et d'étouffement en ensachant les sacs de plastique loin des nouveau-nés et des enfants.
- **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT** en présence de fumée, de liquide inflammable ou de matériel explosif. Flea Doctor™ génère de petits arcs électriques qui peuvent enflammer n'importe quelle vapeur combustible environnante.
- **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN** avant d'utiliser Flea Doctor™ si vous souffrez d'épilepsie ou portez un stimulateur cardiaque ou tout autre neurostimulateur.

MISES EN GARDE

- Risque de choc électrique -
 - N'IMMERGEZ PAS Flea Doctor™ dans un fluide ou liquide. Ce produit n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas s'il est mouillé.
 - N'UTILISEZ PAS Flea Doctor™ lorsque le pelage de votre animal est mouillé ou humide. Assurez-vous que le pelage de votre animal est complètement sec avant d'utiliser l'appareil.
 - NE TENTEZ JAMAIS d'ouvrir Flea Doctor™.
- NE TOUCHEZ PAS aux dents de métal de Flea Doctor™ lorsque vous l'utilisez afin d'éviter toute sensation désagréable de picotement. Flea Doctor™ n'a pas été conçu pour être utilisé sur des humains et peut causer des blessures.
- NE PASSEZ PAS Flea Doctor™ près des blessures, cicatrices, verrues, hématomes, éruptions ou grains de beauté de votre animal. Les dents de métal rigides peuvent causer des douleurs ou des blessures à votre animal.
- N'ÉCHAPPEZ PAS Flea Doctor™ car l'unité ou des pièces pourraient être endommagées ce qui rendrait son utilisation dangereuse.
- Vérifiez Flea Doctor™ avant de l'utiliser. S'il y a un signe visible de dommage, NE L'ALLUMEZ PAS.

ÉLÉMENTS DU PRODUIT

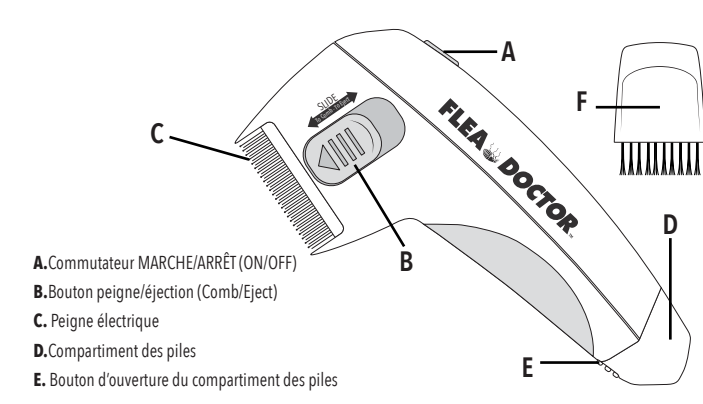

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

1. Ouvrez le compartiment des piles
Illustration A AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le commutateur est à **OFF** avant d'installer les piles.
2. Insérez 2 piles AA (non incluses) en respectant les polarités (+) et (-) indiquées sur les piles et marquées à l'intérieur du compartiment
3. Remplacez le couvercle.
NOTE: Les piles doivent être remplacées si l'appareil n'émet pas de bruit lorsqu'il est mis en marche ou si vous remarquez une baisse de rendement. Veuillez consulter les procédures adéquates dans la section NOTIFICATIONS de la page 1.

POUR COMMENCER

Choisissez l'emplacement où vous peignerez votre animal. Il est recommandé de peigner à l'extérieur afin d'éviter que les puces n'envahissent votre maison. Si vous peignez l'animal à l'intérieur, faites-le au-dessus de papier journal ou de tout autre type de couvre plancher jetable afin de récupérer les puces ou débris qui peuvent tomber.
Avant de peigner votre animal avec Flea Doctor™, brossez-le avec une brosse régulière pour enlever les nœuds qui pourraient obstruer le peigne, surtout si le pelage de votre animal est épais, long ou emmêlé. **N'UTILISEZ PAS Flea Doctor™** si le pelage de votre animal est mouillé ou humide. Assurez-vous que le pelage de votre animal est complètement sec avant d'utiliser l'appareil. Avant d'utiliser Flea Doctor™, remplissez un bol ou un seau d'eau chaude avec savon à vaisselle qui servira de récipient pour les puces et autres débris enlevés avec le peigne. Les puces qui n'auront pas été tuées avec le peigne le seront dans l'eau savonneuse.

MODE D'EMPLOI

1. Commencez par glisser le bouton Comb/Eject vers l'avant afin de dégager le peigne (Illustration C).
2. Lorsque le peigne est dégagé, allumez Flea Doctor™ en glissant le bouton ON/OFF vers le haut (Illustration D).

MODE D'EMPLOI

3. Faites en sorte que votre animal soit calme et débout sur ses pattes. Placez un bras autour du cou ou de l'abdomen pour tenir l'animal sans l'étrangler et tenez Flea Doctor™ avec votre main libre. Passez lentement et doucement le peigne dans le sens du pelage afin d'éliminer les puces adultes. Commencez à peigner la tête, le cou et les épaules en allant vers l'arrière et la queue. Il est recommandé d'être à deux pour peigner les gros animaux ou ceux qui sont agités.

NOTE: Tenez le Flea Doctor™ à un angle de 45 degrés sur la surface de l'animal (Illustration E). Réduisez la pression si votre animal semble inconfortable.

4. Le peigne peut se remplir facilement de puces, poils ou autres débris. Ces débris peuvent réduire l'efficacité de Flea Doctor™ en empêchant d'autres puces vivantes de toucher les dents de métal. Surveillez toute accumulation de débris et enlevez-les fréquemment en éteignant le peigne et en glissant le bouton Comb/Eject vers l'arrière et l'avant pour dégager les dents. Jetez tous les débris dans le bol d'eau savonneuse (Illustration F).

NOTE: L'appareil émettra un bip sonore à des intervalles de quelques secondes pour indiquer qu'il est allumé et en fonction. Assurez-vous qu'il n'y a pas de puces ni débris dans les dents après chaque coup de peigne dans le pelage. Flea Doctor™ continuera de sonner rapidement jusqu'à ce que les puces et débris soient dégagés des dents du peigne.

MODE D'EMPLOI

5. Continuez à peigner vers le dos, la poitrine, les côtés et le ventre de votre animal. Finissez par les pattes et la queue. Concentrez-vous sur la partie arrière, au-dessus de la queue où les puces ont tendance à converger.
IMPORTANT! NE PASSEZ PAS de peigne sur les zones sensibles comme les yeux, les oreilles, la gueule et les parties génitales de votre animal car vous pourriez l'inconforter ou le blesser.
6. Assurez-vous de peigner tout le corps de votre animal. Peignez le plus près possible de la peau afin d'assurer une élimination optimale des puces. Comme les puces ont tendance à s'enfoncer profondément dans le pelage et que vous ne les éliminez peut-être pas au complet du premier coup, il est recommandé de passer le peigne une deuxième fois quelques minutes après la première séance afin de vous assurer de tuer les puces qui resteraient.

NOTE: Il faudra faire plus attention pour éliminer les puces dans les pelages épais de certaines races de chiens ou de chats.

7. Une fois que vous aurez terminé la séance, laissez reposer l'eau savonneuse pendant 10 à 15 minutes de sorte que les puces encore en vie ou paralysées coulent dans le récipient. Éliminez l'eau et jetez le papier journal ou tout autre recouvrement de plancher dans un bac à l'extérieur ou dans un sac à ordures scellé.

NETTOYAGE

1. Nettoyez les dents métalliques du Flea Doctor™ durant son utilisation et après chaque séance. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les débris ou puces du peigne électrique Flea Doctor™ (Illustration G). Si vous nettoyez le peigne à l'intérieur, assurez-vous de faire tomber les débris et les puces dans le bol d'eau savonneuse pour tuer les puces encore vivantes. Consultez la section "Pour commencer".
2. Nettoyez l'extérieur du peigne avec une lingette propre et humide.


LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par:
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
Service à la clientèle:
1-800-304-8354
www.clikit.ca



Kills Fleas* Without Using Pesticides
*80% stunned or killed on contact

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. INJURY CAN RESULT FROM IMPROPER USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

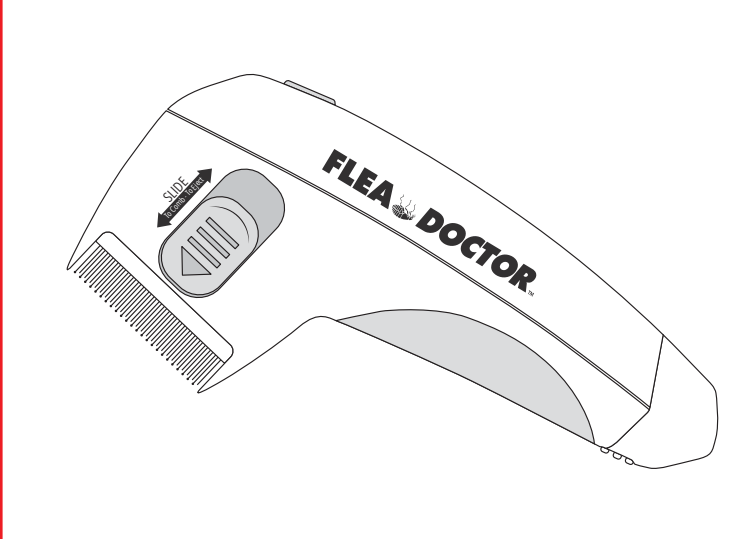

PRODUCT MAY VARY FROM IMAGES SHOWN

TABLE OF CONTENTS

Warnings 2
Product Components 3
Battery Installation & Replacement 3
Getting Started 4
How To Use 4,5,6
How To Clean 6

INTRODUCTION

The Flea Doctor™ is designed to stop and remove adult fleas from your cat or dog. The Flea Doctor™ uses a small electrical charge to kill or stun 80% (average) of the fleas that contact the comb's metal teeth. Actual results will depend on the combing efforts of the user and contacting the fleas with the comb. The Flea Doctor™ can be a helpful part of your home flea control program. Regular, thorough combing with the Flea Doctor™ removes adult fleas from your pet. To help avoid reinfestation you also must remove flea eggs and larvae which will be found in carpets, furniture and pet bedding. Regularly vacuum carpeting, upholstered furniture, low hanging curtains and wood floor cracks to remove eggs and larvae. Regularly wash pet bedding in hot soapy water.

NOTICE

- DO NOT store or use this product near sources of heat or fire as these may damage the unit.
- DO NOT immerse Flea Doctor™ in any fluid or liquid as this may damage the unit.
- DO NOT mix old and new batteries. For best performance, when replacing batteries REPLACE ALL TWO (2) BATTERIES at the same time.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Use only the size and type of battery specified. Mixing batteries of different type, ages or brands may cause them to leak or rupture.


WARNING

- **STORE OUT OF REACH OF CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT A TOY.**
- **SUFFOCATION/CHOKING HAZARD**: To avoid danger of suffocation or choking, keep plastic bags away from babies and children.
- DO NOT operate in the presence of flammable fumes or liquids or explosive materials. Flea Doctor™ generates small electrical arcs that may ignite any flammable vapors that are present.
- **CONSULT YOUR PHYSICIAN** prior to using the Flea Doctor™ if you suffer from epilepsy, or have a pace-maker or other neurostimulator.

CAUTION

- Electrical shock hazard -
 - DO NOT immerse Flea Doctor™ in any fluid or liquid. This product is not waterproof or water resistant. Do not use if it has become wet.
 - DO NOT use Flea Doctor™ when your pet's hair is wet or damp. Make sure your pet's hair is completely dry before use.
 - DO NOT attempt to open the housing of Flea Doctor™ under any circumstance.
- DO NOT touch the metal teeth of the Flea Doctor™ while operating; touching teeth may cause uncomfortable tingling sensation. Flea Doctor™ is not designed for use on people and may cause injury.
- DO NOT run Flea Doctor™ near your pet's wounds, scars, warts, bruises, rashes or moles. The firm metal teeth may cause pain or injury to your pet.
- DO NOT drop the Flea Doctor™, as the unit or its parts may break or suffer damage, rendering it unsafe for use.
- Inspect the Flea Doctor™ prior to use. If there are visible signs of damage, DO NOT turn the unit on.

PRODUCT COMPONENTS

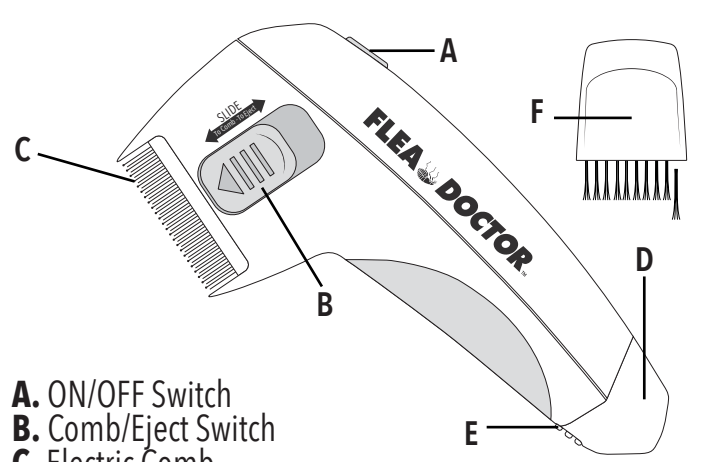

- A.** ON/OFF Switch
B. Comb/Eject Switch
C. Electric Comb
D. Battery Compartment
E. Battery Compartment Release Button
F. Cleaning Brush

BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT

1. Open the Battery Compartment cover. (Figure A)
CAUTION: Ensure unit switch is in the OFF position before installation.
2. Insert 2 AA batteries (not included) into the Battery Compartment. Make sure to line up the (+) and (-) markings on the battery with the (+) and (-) markings on the inside of the Battery Compartment. (Figure B)
3. Reinstall the battery cover.
NOTE: Batteries should be replaced if the unit does not make a sound when turned on, or if you detect a drop in performance. See **NOTICE** section (Fig. 1) for proper procedures.

GETTING STARTED

First choose where to comb your pet. Combing outside is best to prevent any live fleas that escape from populating your home. If combing indoors, do it on top of a newspaper or any type of disposable floor covering to catch any fleas or debris that may drop off during the combing process.

Before combing with the Flea Doctor™, brush your pet with a regular pet brush to remove twists and tangles in the fur that may interfere with thorough combing, particularly if your pet's fur is thick, long or knotted. **DO NOT** use Flea Doctor™ when your pet's hair is wet or damp. Make sure your pet's hair is completely dry before use. Before combing your pet with the Flea Doctor™, prepare a bowl or bucket of warm water and dish soap mixed together. This will serve as a receptacle for the fleas and other debris removed by combing. Any fleas not killed by the comb will be killed in the soapy water.

HOW TO USE

1. Start by releasing the Electric Comb teeth outward by pushing the "Slide to Comb/Eject Switch" forward. (Figure C)
2. Once the Electric Comb teeth are released, turn the Flea Doctor™ on by pushing the ON/OFF Switch upward into the ON position. (Figure D)
NOTE: Successful use of the Flea Doctor™ depends on the user's good combing practices.

HOW TO USE

3. Keep your pet calm and in the standing position. Place one arm around the neck or abdomen to hold your pet still without choking, and hold the Flea Doctor™ with your free hand. Working slowly and gently, stroke the comb in the natural direction of the fur growth to remove adult fleas. Begin combing at your pet's head, neck and shoulders, and work towards the back and tail. For large or fidgety pets, it may be easier to comb with two people.

NOTE: Hold the Flea Doctor™ metal teeth at a 45-degree angle to the surface of the pet. (Figure E) Reduce pressure if your pet appears to be in any discomfort from the Flea Doctor™.

4. The comb may quickly fill up with fleas, bits of fur, and other debris. This debris on the comb may make the Flea Doctor™ less effective by preventing other live fleas from contacting the metal teeth. Watch for the buildup of debris while combing and remove it from the teeth frequently by first turning it off, and then pushing the "Slide to Comb/Eject Switch" backwards and forwards to remove debris from the teeth. Drop all debris into the bowl of soapy water. (Figure F)
NOTE: Unit will make a beep sound every few seconds indicating it is on and working. Make sure the comb teeth are clear of fleas and debris after each sweep through your pet's fur. Flea Doctor™ will continue to beep rapidly until comb teeth are cleared.

HOW TO USE

5. Continue combing down the back, chest, sides and belly of your pet. Finally, finish on your pet's legs, paws and tail. Be sure to focus on the lower back area above the tail where fleas may tend to congregate.
IMPORTANT! DO NOT comb over your pet's sensitive areas such as eyes, ears, mouth & genitals as this may annoy or injure your pet. Also avoid combing over any wounds, scars, warts, bruises, rashes or moles. The firm metal teeth may cause pain or injury to your pet.
6. Make sure to comb your pet's whole body. Comb as close to the skin's surface as possible to ensure optimal flea removal. Fleas may be missed as they move deeper into the fur. A second brushing is recommended a few minutes later to catch any fleas missed.
NOTE: Breeds with thick fur will require greater care to locate all fleas.
7. Once you've completed the flea combing session, let the soapy water stand for 10-15 minutes so any live or stunned fleas drown in the bowl. Then flush the soapy water and discard any newspaper or disposable floor coverings in an outdoor receptacle or in a sealed trash bag.

HOW TO CLEAN

1. Clean the metal teeth of the Flea Doctor™ during use as needed and after each combing. With the provided Cleaning Brush, brush out any remaining debris or fleas from the Flea Doctor™ Electric Comb. (Figure G) If cleaning indoors, brush debris into the bowl of warm soapy water to kill any live or stunned fleas. See "Getting Started."
2. To clean the exterior of the unit, wipe down with a clean damp cloth.

LIMITATION OF LIABILITY
Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product.

Distributed by:
Supertek Canada Inc.
Mount Royal, QC H4T 1X2
Customer Service:
1-800-304-8354
www.clikit.ca