


REDRESSEUR DE POSTURE AJUSTABLE

- Commencez par porter le redresseur de posture de 20 à 30 minutes par jour.
- Augmentez progressivement jusqu'à 1 à 2 heures par jour.
- Portez le produit sur un maillot de corps léger pour un confort maximal.

COMMENT UTILISER

Pour un bon alignement:

- Le haut du produit doit reposer sous le cou.
- Le bas doit être sous les omoplates (Images 1 & 2)

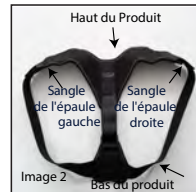

NOTE: Assurez-vous que les bretelles réglables sont fixées dans une position détendue près du bas des aisselles avant d'enfiler le redresseur.


1. Avec le logo Copper Fit® face vers l'extérieur (Image 3), enfiler le produit comme un sac à dos.




Tirez confortablement les deux bretelles sur vos épaules (Images 4 à 7)




2. Les bretelles doivent reposer sur la zone des épaules (Image 8)

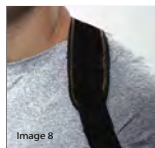

3. Détachez les sangles réglables du produit et tirez vers le haut jusqu'à obtenir le support désiré (Image 9).

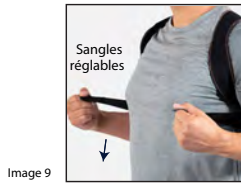

4. Fixez les sangles réglables à nouveau sur le produit. (Image 10).

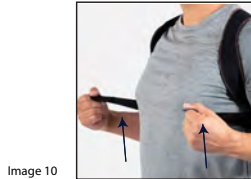

NOTE: Le produit doit être confortable et vos épaules ne doivent pas pouvoir rouler vers l'avant. Il ne doit jamais être trop serré pour provoquer une douleur ou un inconfort.

5. Pour ajuster la sangle arrière:

Si les bretelles réglables semblent trop hautes sous les aisselles, vous pouvez ajuster la sangle arrière.

- Pour raccourcir: Détachez la sangle arrière réglable et tirez vers le haut (Image 11).



- Pour allonger: Détachez la sangle arrière réglable et abaissez-la, en l'éloignant des coutures de couleur cuivre situées en haut du produit (Image 12).
- Fixez solidement la sangle arrière réglable à l'attache.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canda Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Visitez **CLIKIT.CA** pour découvrir toute notre gamme de produits et offres spéciales

Distribué par: SUPERTEK CANADA INC., Mont-Royal, QC H4T 1X2

WWW.CLIKIT.CA

Service à la clientèle: 1-800-304-8354